

人白细胞介素27酶联免疫吸附测定试剂盒

Human IL-27 ELISA Kit

本产品需冰袋运输。保存于4°C，保质期6个月；保存于-20°C，保质期12个月。

产品参数

| | |
|------|-----------------------|
| 货号 | HJ293 |
| 规格 | 96次 |
| 检测范围 | 0.156 ng/mL~10 ng/mL |
| 敏感性 | 25 pg/mL |
| 特异性 | 系统和其它因子无交叉反应 |
| 样本类型 | 人血清、血浆、体液、组织匀浆或细胞培养上清 |

产品简介

本试剂盒采用双抗体夹心 ELISA 法检测样品中人 IL-27 的浓度。人 IL-27 捕获抗体已经预包被于酶标板上，当加入样品或标准品时，其中的人 IL-27 会与捕获抗体结合，而其它游离成分则会通过洗涤被除去。接着，再加入生物素标记的人 IL-27 抗体后，抗人 IL-27 抗体与人 IL-27 接合，形成夹心的免疫复合物，其它游离成分则通过洗涤被除去。随后加入酶复合物，生物素与酶复合物特异性结合，这样酶复合物上的 HRP 就与夹心的免疫复合物连接起来，而其它游离成分则通过洗涤被除去。最后加入显色剂，若样品中存在人 IL-27，则会形成免疫复合物，其上连接的 HRP 会催化无色的显色剂氧化生成蓝色物质，而后加入终止液，最终产物呈黄色。通过酶标仪检测，读取 450 nm 处的 OD 值，人 IL-27 浓度与 OD450 值之间呈正比，通过检测标准品绘制标准曲线，对照未知样品中 OD 值，即可计算出样品中人 IL-27 的浓度。

背景简介

人白细胞介素 -27 (Interleukin-27, IL-27) 是 IL-12 家族的异二聚体细胞因子，由 EB13 (Epstein-Barr-virus-induced 分子 3) 和 p28 两个亚基组成。IL-27 增强 CD8+ T 细胞的发育、增殖和细胞毒性，从而间接促进抗肿瘤免疫。IL-27 可以抑制 T 细胞增殖，刺激细胞毒性 T 细胞活性，诱导 B 细胞中的同型转换，抑制 Th2、Th17 和 Treg 的分化，并且对先天免疫细胞有多种影响。IL-27 可以激活 STAT1、STAT3、STAT6、ERK 和 p38 MAPK 以及 Akt，导致细胞增殖增强。它还可以与 IL-12 强烈协同作用，触发初始 CD4 T 细胞产生干扰素 γ (IFN- γ)，并与细胞因子受体 WSX-1/TCCR 结合。



产品内容

| 组分 | 体积或数量 |
|---------------------|----------------------|
| 人IL-27预包被板 | 8孔条×12个 |
| 样品稀释液 | 30 mL |
| 重组人IL-27标准品(冻干) | 2支(10 ng/支) |
| 生物素标记人IL-27抗体 | 130 μ L(效价1:100) |
| 抗体稀释液 | 12 mL |
| 酶复合物(HRP标记的链霉亲和素) | 130 μ L(效价1:100) |
| 酶复合物稀释液 | 12 mL |
| 浓缩洗涤液(25 \times) | 30 mL |
| 显色剂TMB | 10 mL |
| 终止液 | 10 mL |
| 封板胶纸 | 4张 |

操作步骤

样品制备

1. 根据样品种类选择相应的处理方法:

- 细胞上清:** 将细胞培养上清液100~500 $\times g$ 离心5 min, 去除悬浮物后即可;
- 血清样品:** 将全血在室温下静置0.5~2 h, 待其自然凝固并析出血清后, 离心取黄色上清即可(4 $^{\circ}$ C, 1,000~2,000 $\times g$, 10 min), 注意请勿吸取沉淀, 制备好的血清需置于冰上待用, 请勿在其中添加任何防腐剂或抗凝剂;
- 血浆样品:** 使用EDTA对全血进行抗凝处理后, 混合均匀置于冰上, 离心取黄色上清即可(4 $^{\circ}$ C, 1,000~2,000 $\times g$, 10 min), 注意请勿吸取沉淀, 制备好的血浆需置于冰上待用;
- 组织匀浆/体液:** 离心去除沉淀即可。

注意: ① 若待测样品无法及时检测, 样品制备完成后, 请分装冻存于-20 $^{\circ}$ C, 避免反复冻融;
② 请保证待测样品清澈透明, 检测前如发现样品中有悬浮物, 需通过离心去除;
③ 为了保证检测结果准确, 请勿使用溶血、黄疸、高血脂或污染的样品。

2. 稀释样品

查阅相关文献, 预估样品中待测因子的含量, 从而确定适当的稀释倍数, 使稀释后样品中待测因子的浓度处于 ELISA 试剂盒的最佳检测范围。根据待测因子含量的不同, 分别采取不同的稀释方案:

- 待测因子含量在 100~1,000 ng/mL 范围内, 一般按 1:100 稀释, 即向 297 μ L 样品稀释液中加入 3 μ L 样品;
- 待测因子含量在 10~100 ng/mL 范围内, 一般按 1:10 稀释, 即向 225 μ L 样品稀释液中加入 25 μ L 样品;
- 待测因子含量在 0.156~10 ng/mL 范围内, 一般按 1:2 稀释, 即向 100 μ L 样品稀释液中加入 100 μ L 样品;
- 待测因子含量 \leq 0.156 ng/mL, 样品一般无需稀释。

以上方案仅供参考, 实验中请详细记录样品的稀释方法。



检测准备工作

3. 试剂盒自 4°C 冰箱取出后, 请置于室温平衡 20 min; 如从 -20°C 取出, 各组分需彻底融化后再平衡 20 min; 检测完成后, 剩余试剂请及时置于 4°C 或 -20°C 保存;
4. 将 **浓缩洗涤液(25×)** 用双蒸水或去离子水稀释成 1× 洗涤液;
5. 重组人 IL-27 标准品的稀释和使用(在使用前 2 h 内准备, 室温操作, **请严格控制在 25~28°C**)
 - ① 配制 10 ng/mL 标准品: 取 1 mL 样品稀释液加入标准品管内, 盖好后静置 15 min 以上, 然后反复颠倒 / 搓动以助溶解;
 - ② 按下表将 10 ng/mL 标准品用样品稀释液进行倍比梯度稀释。(最高浓度为 10 ng/mL, 将标准品稀释液作为浓度 0 ng/mL。)

| 管号 | 稀释液用量(μL) | 复溶后标准品用量(μL) | 标准品的最终浓度(ng/mL) |
|----|-----------|--------------|-----------------|
| A | 0 | 1,000 | 10 |
| B | 300 | 300(从A管中取) | 5 |
| C | 300 | 300(从B管中取) | 2.5 |
| D | 300 | 300(从C管中取) | 1.25 |
| E | 300 | 300(从D管中取) | 0.625 |
| F | 300 | 300(从E管中取) | 0.312 |
| G | 300 | 300(从F管中取) | 0.156 |
| H | 300 | 0 | 0 |

注意: 标准品复溶加样后, 剩余部分请丢弃。

6. 准备生物素标记人 IL-27 抗体工作液
 - ① 按每孔需添加 100 μL 抗体工作液, 计算其总用量 (为弥补操作中的损耗, 需多配制 100~200 μL);
 - ② 按 1 μL **生物素标记人 IL-27 抗体** 添加 99 μL **抗体稀释液** 的比例配制工作液, 轻轻混匀。
7. 准备酶复合物工作液 (需在使用前 1 h 内准备)
 - ① 按每孔需添加 100 μL 酶复合物工作液, 计算其总用量 (为弥补操作中的损耗, 需多配制 100~200 μL);
 - ② 按 1 μL **酶复合物** 添加 99 μL **酶复合物稀释液** 的比例配制工作液, 轻轻混匀。

检测流程

8. 通过计算确定一次实验所需的板条数, 取出所需板条放置于框架内, 多余的板条请放回铝箔袋密封, 保存于 4°C 或 -20°C;
注意: ① **标准品和样品建议做双复孔检测;**
② **每次实验均需绘制标准曲线。**
9. 将用样品稀释液稀释后的样品和不同浓度标准品 (100 μL/ 孔) 分别加入相应孔中, 用封板胶纸封住反应孔, 37°C 孵育 90 min;
注意: ① **请查阅相关文献确定样品中待检测蛋白的大致浓度, 若其大于本试剂盒标准曲线的最大标准品浓度, 请将样品适当稀释后再进行检测;**
② **整个加样过程不宜超过 10 min, 否则可能会影响检测结果。**
10. 甩去酶标板内液体, 无需洗板, 将板倒扣在吸水纸上拍干;
11. 加入稀释后的生物素标记人 IL-27 抗体工作液 (100 μL/ 孔), 用封板胶纸封住反应孔, 37°C 孵育 60 min;

12. 洗板 5 次, 每孔 1× 洗涤液用量为 300 μL , 注入与吸出间隔 15~30 s, 洗完后将板倒扣在吸水纸上拍干;
注意: 洗涤过程至关重要, 洗涤不充分会导致结果产生较大误差。
13. 加入稀释后的酶复合物 (100 μL / 孔), 用封板胶纸封住反应孔, 37°C 避光孵育 30 min;
14. 洗板 5 次, 方法同步骤 12;
15. 加入 显色剂 TMB (100 μL / 孔), 用封板胶纸封住反应孔, 避光 37°C 反应 10~25 min;
注意: ① 在保存和使用时, 请勿将 TMB 接触氧化剂和金属;
② 因实验室条件差异, 最佳显色时间会有所不同, 反应充分时肉眼可见标准品的前 3-4 孔有明显的梯度蓝色。
16. 加入 终止液 (100 μL / 孔), 混匀后即刻使用酶标仪测量 OD450, 同时设定 540 nm 或 570 nm 作为校正波长, 即可计算得到校正吸光度值 (OD450-OD540 或 OD450-OD570);
注意: 读取 OD 值建议在 10 min 内完成。


数据分析

17. 绘制标准曲线。以标准品浓度作横坐标, OD 值作纵坐标, 利用计算机软件作四参数逻辑 (4-PL) 曲线拟合创建标准曲线, 通过样品的 OD 值即可在标准曲线上计算出其相应浓度。
注意: ① 复孔 OD 值在 20% 的差异范围内结果才有效, 复孔 OD 值取平均后可作为测量值;
② 若样品 OD 值高于标准曲线上限, 应适当稀释后重测, 计算浓度时应乘以稀释倍数。

标准曲线范例

人 IL-27 参考标准曲线

| 标准品浓度 | O.D. |
|-------------|-------|
| 0 ng/mL | 0.119 |
| 0.156 ng/mL | 0.209 |
| 0.312 ng/mL | 0.301 |
| 0.625 ng/mL | 0.495 |
| 1.25 ng/mL | 0.856 |
| 2.5 ng/mL | 1.402 |
| 5 ng/mL | 2.010 |
| 10 ng/mL | 2.496 |

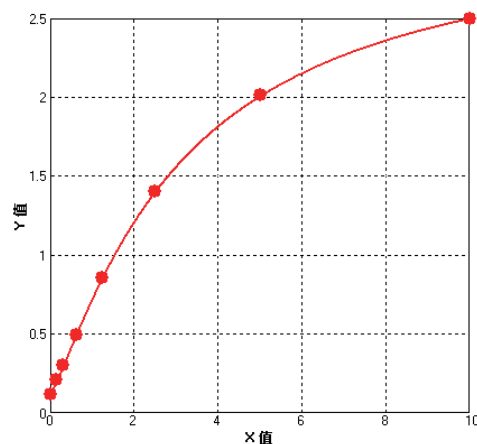

注意: 本图仅供参考, 应以同次试验标准品所绘标准曲线计算样品含量。

注意事项

1. 浓缩洗涤液 低温情况下可能会出现结晶, 请水浴加热使结晶完全溶解后再配制工作液;
2. 严禁混用不同批号试剂盒的组分;
3. 加样过程请避免产生气泡, 实验操作过程中一定要保证试剂充分混匀, 否则会使结果产生较大误差;
4. 说明书中提到的室温条件, 请严格控制在 25~28°C;
5. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作;
6. 本产品仅限科研使用。